


CABINA DE SECADO FORENSE DE 1 PUERTA

CS-101

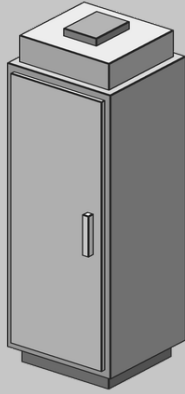

Cabina de secado forense FRICON de una puerta, destinada al secado controlado de evidencias biológicas —prendas, calzado, armas y muestras húmedas— en laboratorios de criminalística, unidades de policía judicial y servicios de medicina legal. La cabina crea un flujo de aire dirigido y filtrado que extrae la humedad de la evidencia sin dispersar partículas ni aerosoles al ambiente del laboratorio, condición indispensable para preservar la integridad de la muestra y la cadena de custodia. El aire de salida atraviesa prefiltro, filtro HEPA y filtro de carbón activado antes de descargar al recinto, de modo que la cabina no requiere

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CS-101

Origen: Nacional

Capacidad: 1 cámara

Especificaciones Técnicas

Configuración	1 cámara de secado con puerta abatible y visor
Material	Polipropileno de alta densidad, resistente a solventes y desinfectantes
Visor	Ventana en vidrio triplex de seguridad para inspección sin apertura
Filtración	Prefiltro lavable + filtro HEPA H14 + filtro de carbón activado
Operación	Sin conductos; recirculación filtrada al recinto
Descontaminación	Ciclo interno de esterilización por lámpara ultravioleta germicida
Monitorización	Sensores de humedad relativa y temperatura con lectura digital
Interior	Barras y ganchos de colgado, y rejilla de fondo para evidencia en plano
Dimensiones	760 mm (an) × 710 mm (fondo) × 1.900 mm (alto)
Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
Nivel sonoro	Inferior a 55 dB(A) en operación
Peso aproximado	78 kg

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

ducto al exterior. Un ciclo interno de esterilización ultravioleta descontamina la cámara entre evidencias, evitando la contaminación cruzada entre casos.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad