


MESA DE AUTOPSIA CON RESPALDO Y DUCHA MA-215

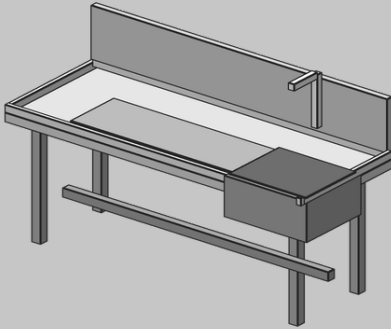

Mesa de autopsia FRICON con respaldo posterior alto y sistema de lavado a presión, diseñada para salas de necropsia de alto volumen donde se requiere proteger el muro y facilitar el aseo de la estación de trabajo. El respaldo, fabricado en la misma lámina de la cubierta y soldado en continuidad con ella, evita el paso de fluidos hacia la pared y soporta la grifería, la ducha de mano y la pistola pulverizadora de alta presión. La cubierta cuenta con reborde perimetral, pendiente hacia el desagüe y rejillas extraíbles que permiten trabajar sobre superficie seca. Todos los accesorios son desmontables sin herramienta para su limpieza y

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: MA-215

Origen: Nacional

Capacidad: 250 kg

Especificaciones Técnicas

Superficie de trabajo Cubierta embutida con reborde perimetral realizado de 50 mm

Respaldo posterior Respaldo integrado de 340 mm de alto, soldado en continuidad con la cubierta

Material Acero inoxidable AISI 304 calibre 16, acabado sanitario No. 4

Pistola de lavado Pistola pulverizadora desmontable de alta presión con manguera de 2 m

Ducha de mano Ducha teléfono con manguera flexible de 3 m y soporte en el respaldo

Grifería Mezclador monomando de agua fría y caliente, cuello de ganso giratorio

Rejillas de trabajo 3 rejillas perforadas extraíbles de acero inoxidable

Desagüe Desagüe central de 2" con trampa de sólidos desmontable

Estructura Patas en tubo cuadrado de 60 mm con travesaño perimetral de refuerzo

Dimensiones 2.150 mm (largo) × 850 mm (ancho) × 900 mm (alto sin respaldo)

Altura total con respaldo 1.240 mm

Capacidad de carga 250 kg

Peso aproximado 110 kg

Instalación Hidráulica y Eléctrica

Suministro de agua Acometida agua fría y caliente en 1/2", grifería monomando de cuello de ganso giratorio



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

desinfección.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Ducha de mano	Ducha teléfono con manguera flexible de 3 m y soporte de pared
Desagüe	Sifón sanitario de 2" con rejilla y trampa de sólidos desmontable en acero inoxidable
Tomas eléctricas	2 tomacorrientes monofásicos 110 V con tapa a prueba de agua (IP55) y polo a tierra
Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
Iluminación	Luminaria LED de trabajo sobre la mesa, grado de protección IP55, con interruptor independiente

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radio interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
-------------	--

Especificaciones Técnicas (continuación)

Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad